

CosmicData Hub 生物信息云平台

使用说明

1. 登录、注册、验证码与密码维护

1.1 登录步骤

打开平台地址：<https://cosmicdatahub.cwmda.com:9000/#/home>，进入首页和登录页，输入客户账号、密码、验证码，按需勾选“记住密码”，公共电脑或共享设备不建议勾选。点击“登录”，系统校验成功后进入首页工作台。



图 1 平台访问首页

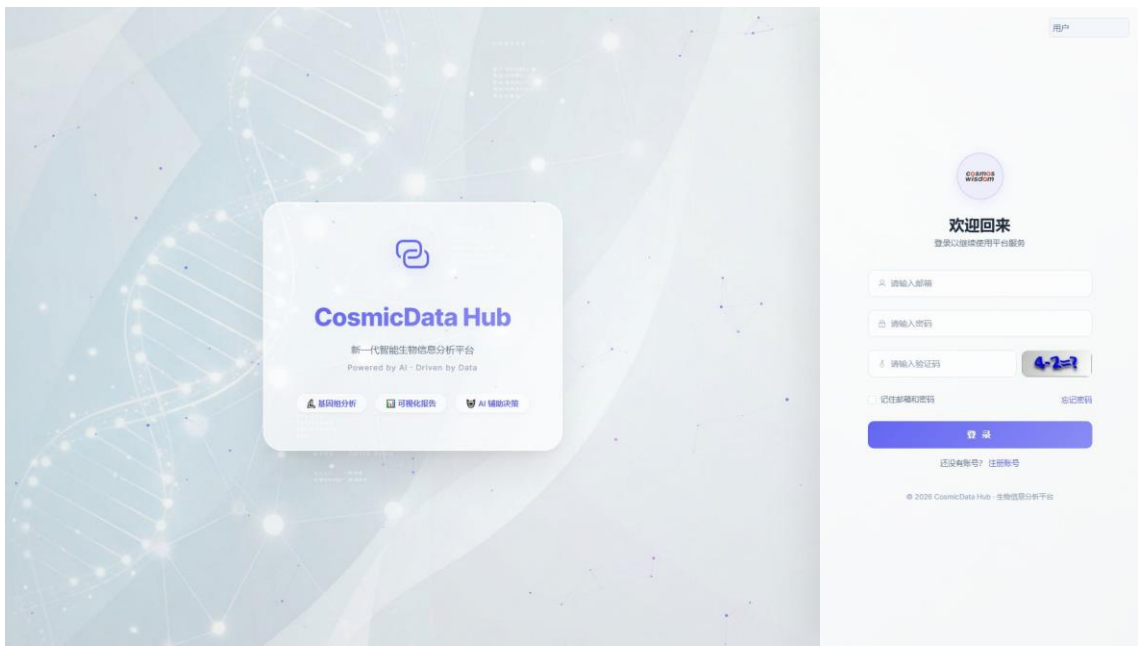


图 2 账号登录页面

1.2 注册与邀请码填写

客户首次使用平台时，如果已有项目关联，系统会自动开通账号并将登录账号和初始密码以邮件形式进行告知。如果没有对应项目关联，用户也可通过登录页的“注册”入口自行注册。是否填写邀请码取决于客户加入团队的方式和页面提示。

场景	邀请码是否填写	说明
受邀加入客户团队	需要填写	使用邀请邮件或项目对接人员提供的邀请码完成注册，注册后账号会自动归属到对应团队。
普通客户自助注册	可不填写或按页面要求填写	注册页邀请码不是必填项，可先完成账号注册，以游客身份访问平台进行功能试用。
邀请码失效或填写错误	重新获取	联系客户主账号、项目交付人员或平台管理员重新发送邀请码。

点击登录页“注册”入口，按页面要求填写邮箱、验证码、密码等信息，如果用户是受邀加入团队，请填写收到的邀请码，如果用户想试用平台，邀请码可以不填，以游客身份完成账号注册即可，注册成功后建议返回登录页重新登录，并确认是否能看到对应项目和团队信息。

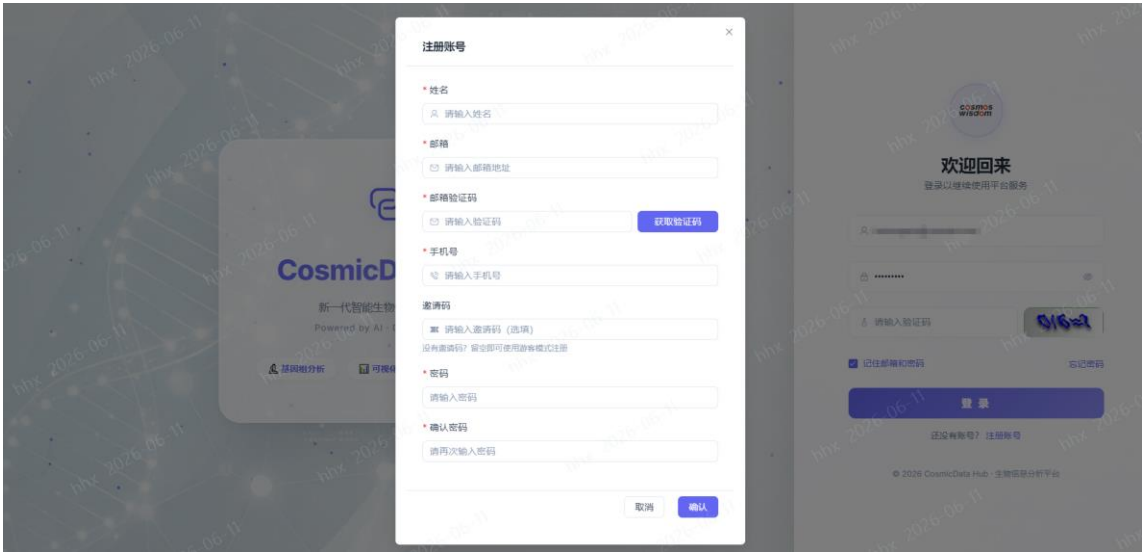


图 3 账号注册页面

1.3 密码与账号安全

首次登录后建议及时确认账号信息，并通过个人中心修改初始密码，忘记密码时，可通过登录页“忘记密码”入口按邮箱验证码重置，不要多人共用同一个客户账号；多人协作时建议由主账号邀请子账号；离开电脑前请退出登录，避免项目数据和报告被他人查看。

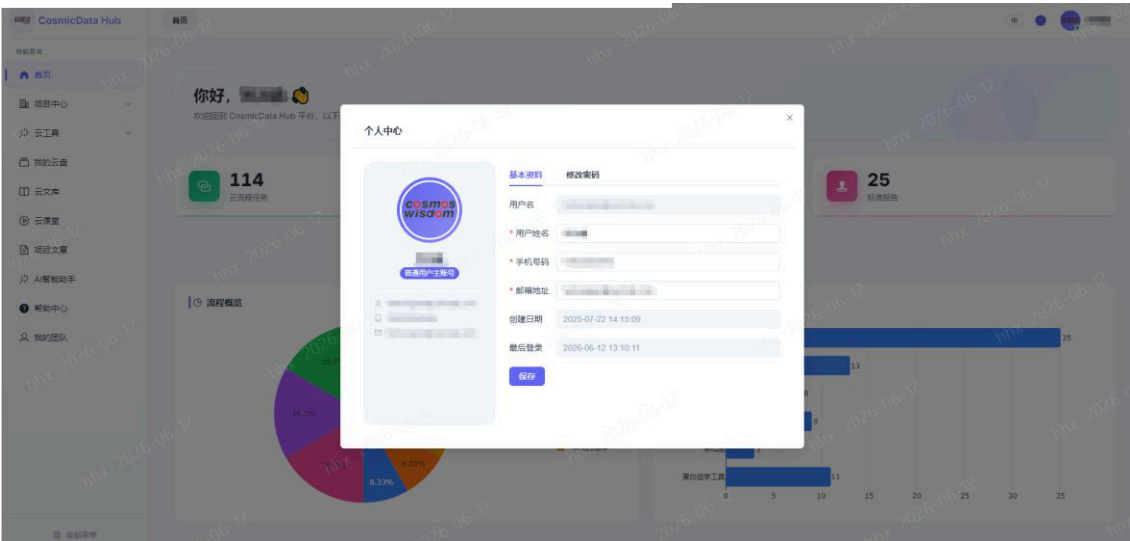


图 4 账户个人中心页面

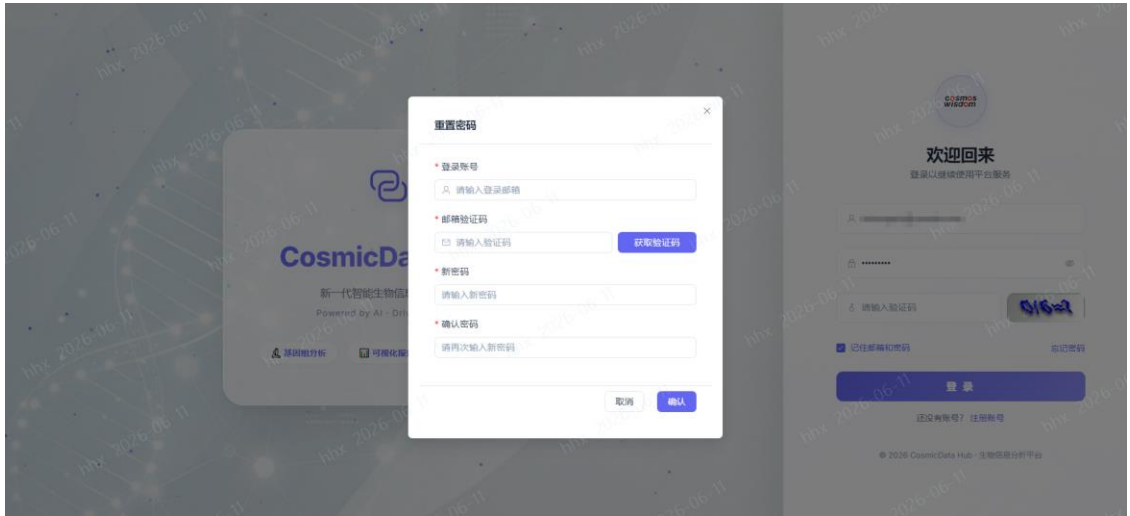


图 5 重置登录密码页面

2. 首页工作台

首页用于快速了解客户账号可见范围内的项目、任务、报告和平台资源概况。不同客户账号看到的数据会根据团队、项目授权和角色权限自动变化。


- A. 统计卡片：快速查看项目数、任务数、报告数等整体情况。
- B. 图表区域：了解云流程、云工具或云课堂等资源的汇总概况。
- C. 左侧菜单：进入项目中心、云工具、知识服务、AI 助手、我的团队等功能。
- D. 右上角账号区域：查看账号信息、切换语言或退出登录。



3. 项目中心

3.1 我的报告

“项目中心—我的报告—我的标准报告”模块汇总了客户账户下所有已交付的标准报告，用户可进行确认单确认、简易报告查看和下载、完整结果下载、自定义报告以及一键重分析等操作。

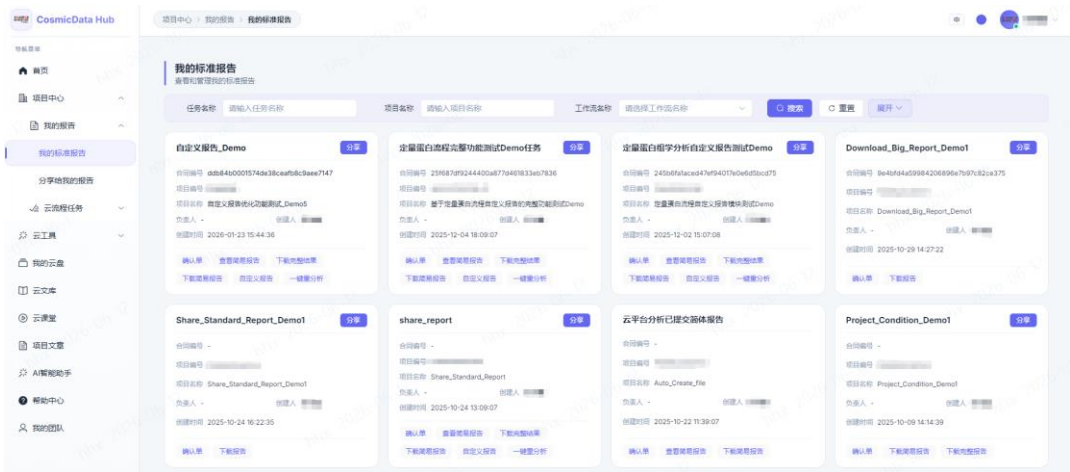

3.2 查看报告

进入路径：项目中心 — 我的报告 — 我的标准报告，可按项目名称、任务名称、工作流名称、状态等条件筛选。点击标准报告卡片内的“确认单”，即可跳转具体的确认单详情，根据信息内容可对该信息单进行确认或拒绝操作。

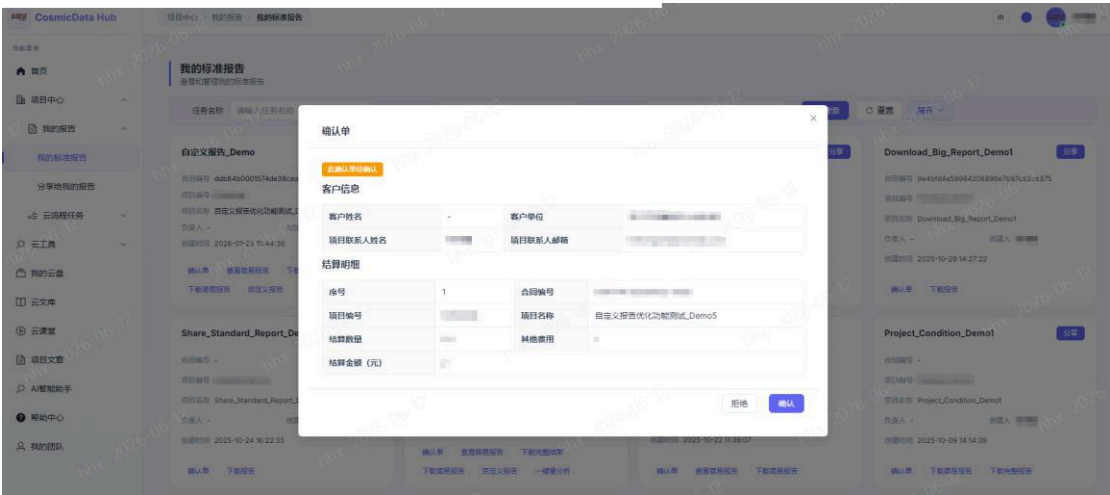


图 8 确认单详情页面

点击卡片内的“查看简易报告”，即可对标准报告内容进行预览查看，支持通过导航栏快速导览，也可以将报告以 HTML 和 PDF 格式进行下载，同样也支持直接打印报告。



图 9 简易报告页面

点击卡片内的“下载完整结果”，系统会自动跳转出结果文件弹窗，用户可选择对应的文件进行批量下载。

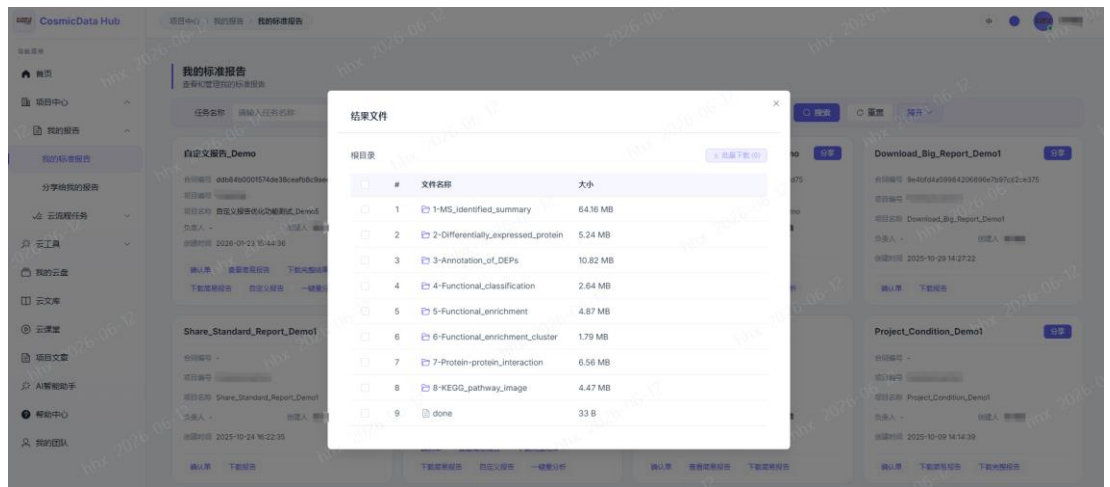


图 10 完整结果详情页面

3.3 自定义报告

点击卡片内的“自定义报告”可跳转到自定义报告页面，用户首先可以点击左下角的”结题报告“选项对我们的结题报告进行预览和编辑，可支持替换 Logo 和项目信息等，替换后的信息在下载的报告中会同步生效。



图 11 自定义报告页面

点击左上角具体工具模块菜单，可跳转到具体工具配置页面，用户可参照工具说明和帮助信息对流程中的某个模块工具进行改参数重新分析，配置好后点击右上角的“运行”即可。

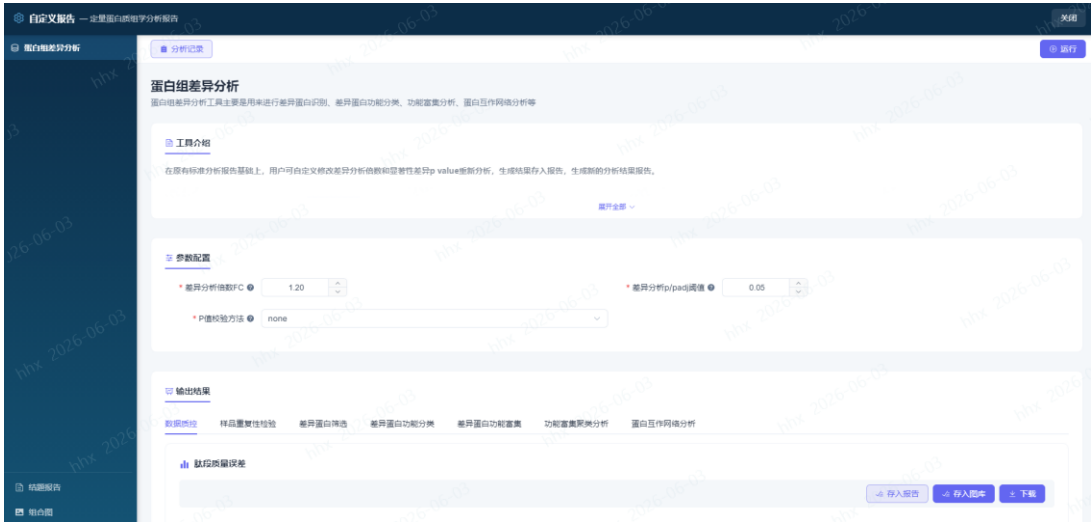


图 12 流程模块工具配置页面

通过点击页面上方的“分析记录”按钮即可查看所有提交的历史记录，通过选择不同的分析记录可对不同的结果进行切换查看。另外第一条分析记录是最初的流程记录，通过点击”查看报告“可对最初的结题报告内容进行回溯查看。

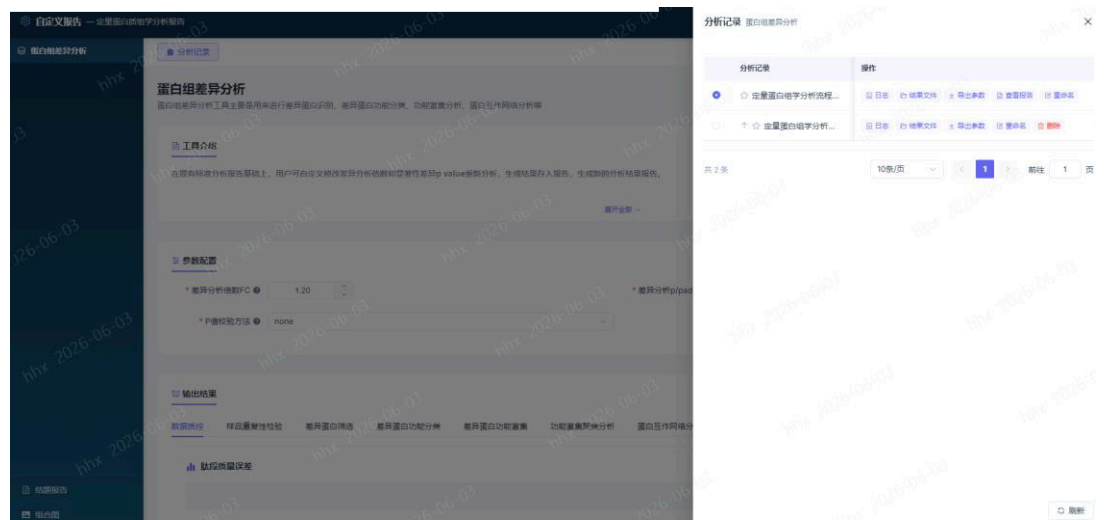


图 13 流程模块工具历史分析记录页面

单条分析记录生成的结果可通过不同的页签进行分类查看。



图 14 具体结果呈现页面

结果包含图片可视化类和表格类等多种样式。对于图片类的结果，用户可直接在图上进行编辑修改的交互操作，如修改主题色、坐标轴设置、标签设置等，设置编辑的内容会即时渲染生效。用户通过点击“存入报告”可实现将修改后的图片替换原始报告中对应的内容，通过点击“下载”可将图片以多种格式进行下载。

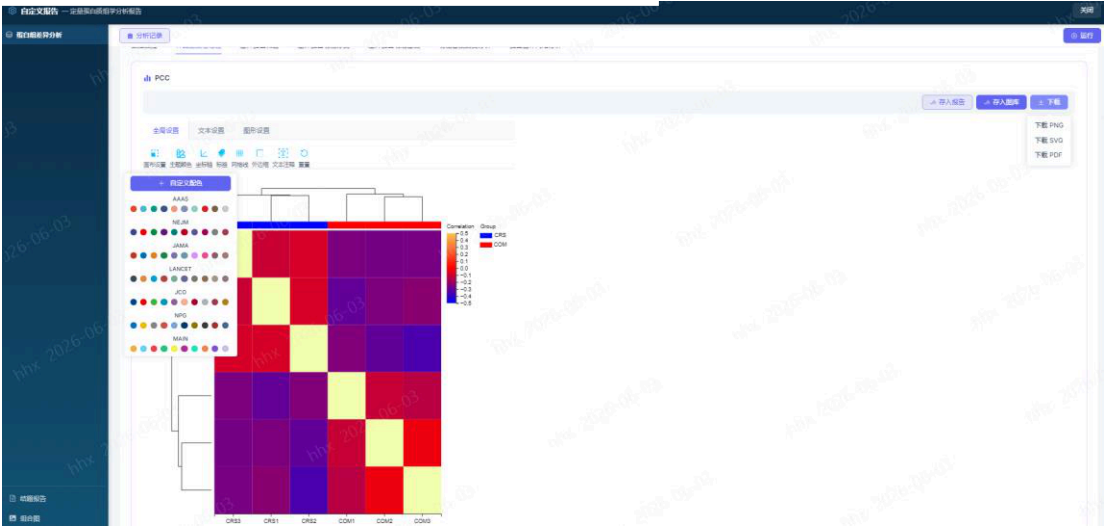


图 15 可视化结果自定义编辑页面

对于表格类的结果，支持用户进行表格筛选、存入报告和下载等操作。

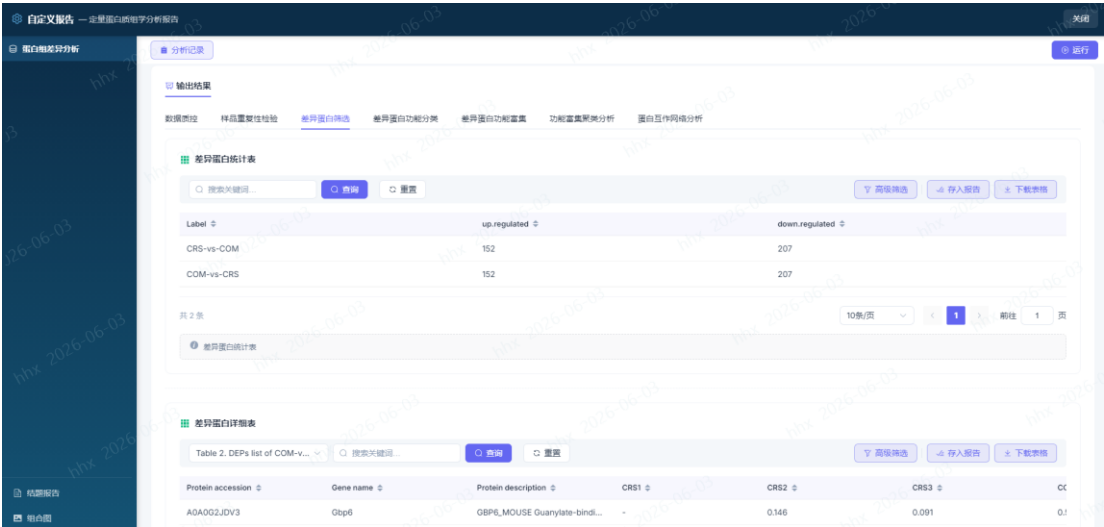


图 16 表格结果呈现页面

对于图片类的结果支持用户点击“源数据”跳转查看当前图片对应的源数据内容。

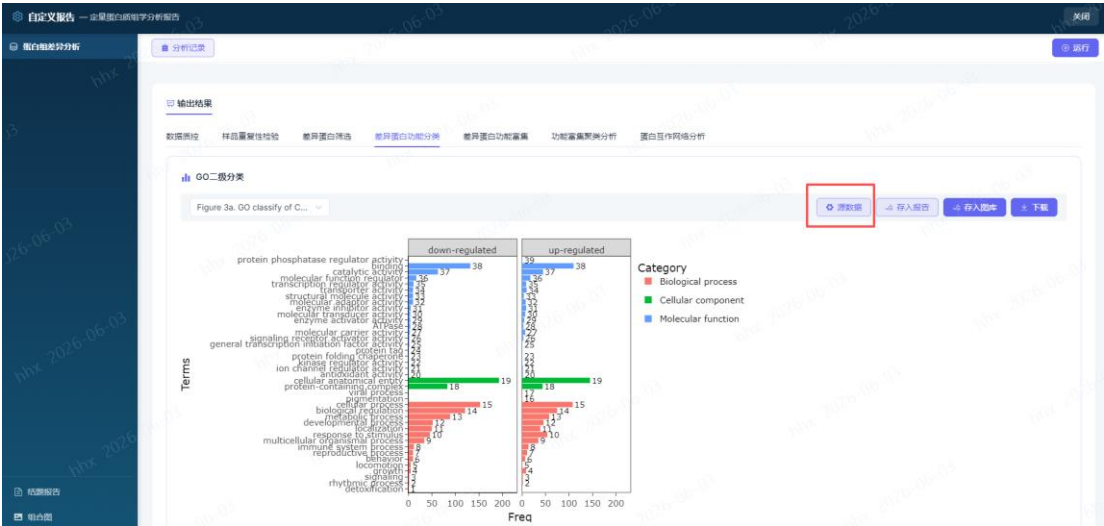


图 17 点击源数据页面

CosmicData Hub 生物信息云平台使用说明书

用户可对源数据进行筛选、创建分组、批量修改等一系列操作。



图 18 源数据详情呈现页面

用户对源数据编辑修改好之后，通过点击“继续分析”可跳转到对应的云工具弹窗进行二次分析。



图 19 源数据继续分析页面

用户只需勾选对应的云工具后点击“确认”即可。

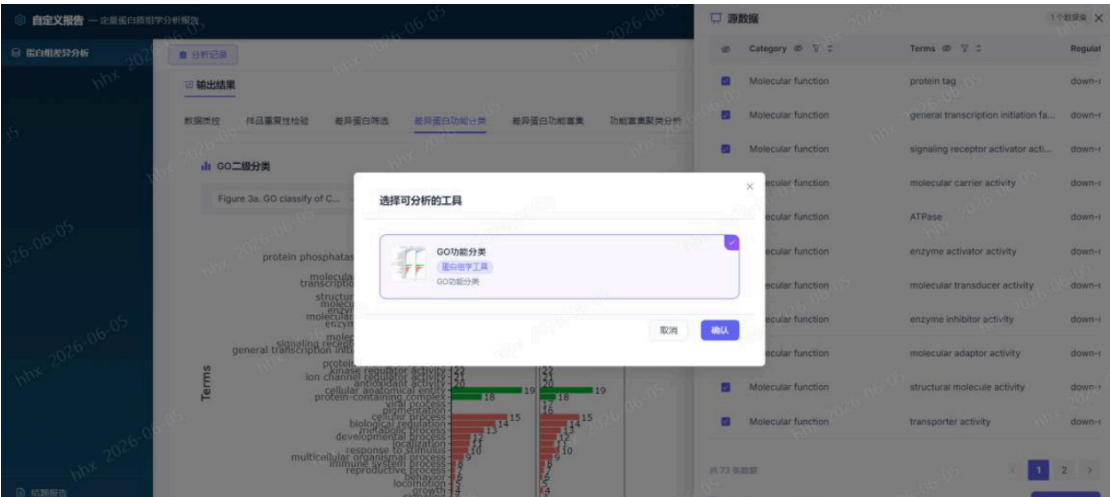


图 20 勾选云工具页面

接着系统会自动进入勾选的云工具配置界面，对应的源数据已自动填充。

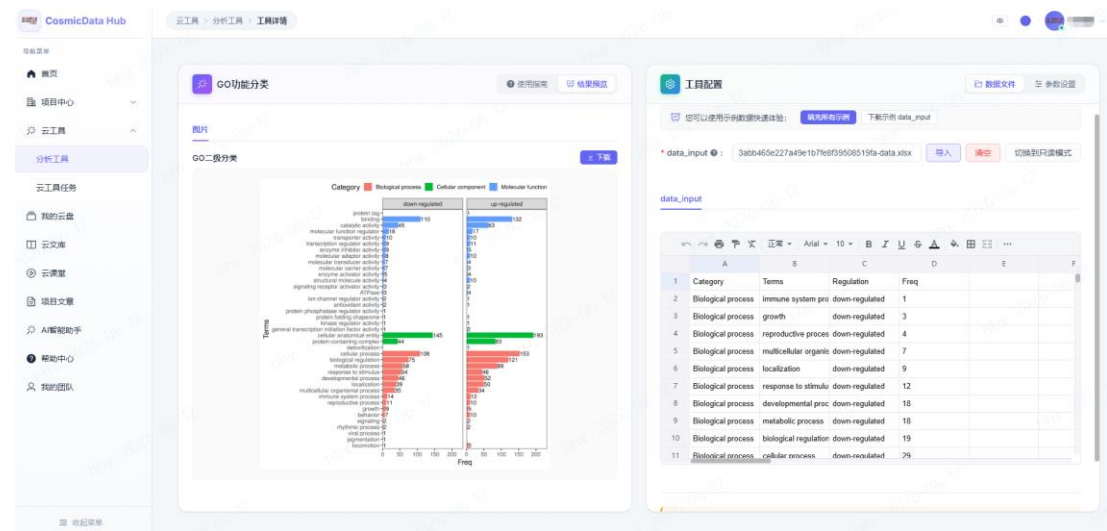


图 21 云工具详情呈现页面

用户只需要点击下一步进入对应的参数配置页面，对输入参数进行配置好后，点击“提交”即可。针对设置一半的参数，系统支持暂存，并且对于输入参数还支持批量导出，后期用户可将导出的参数模板直接进行批量导入，实现快速提交分析的目的。

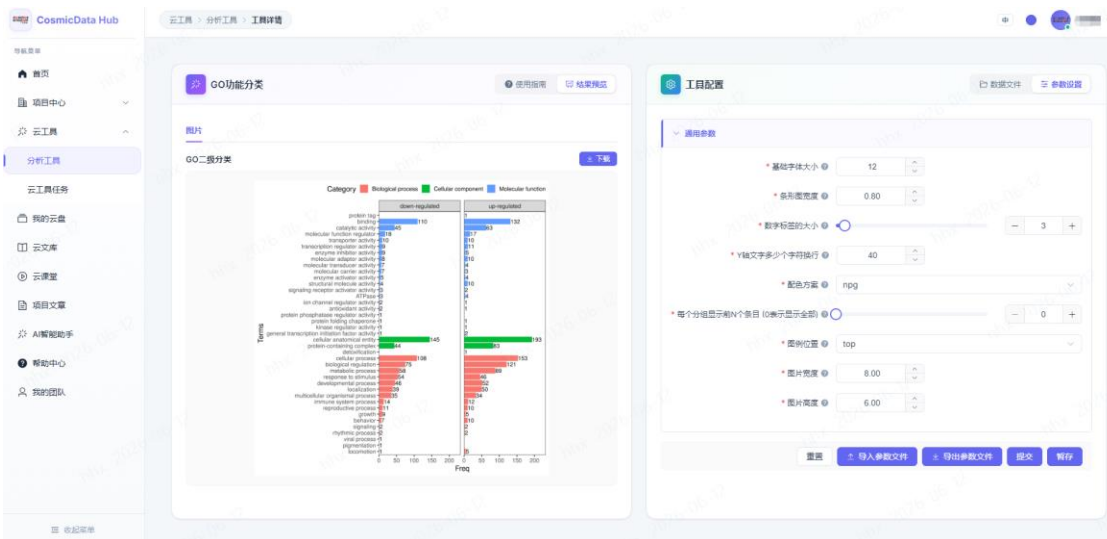


图 22 云工具配置参数页面

提交的分析记录可以在“云工具—云工具任务”中根据任务名称、任务 ID 等信息进行精确定位查看。对于查找到的任务记录，用户可以执行查看输入参数阈值、分析日志、结果文件等一系列操作。

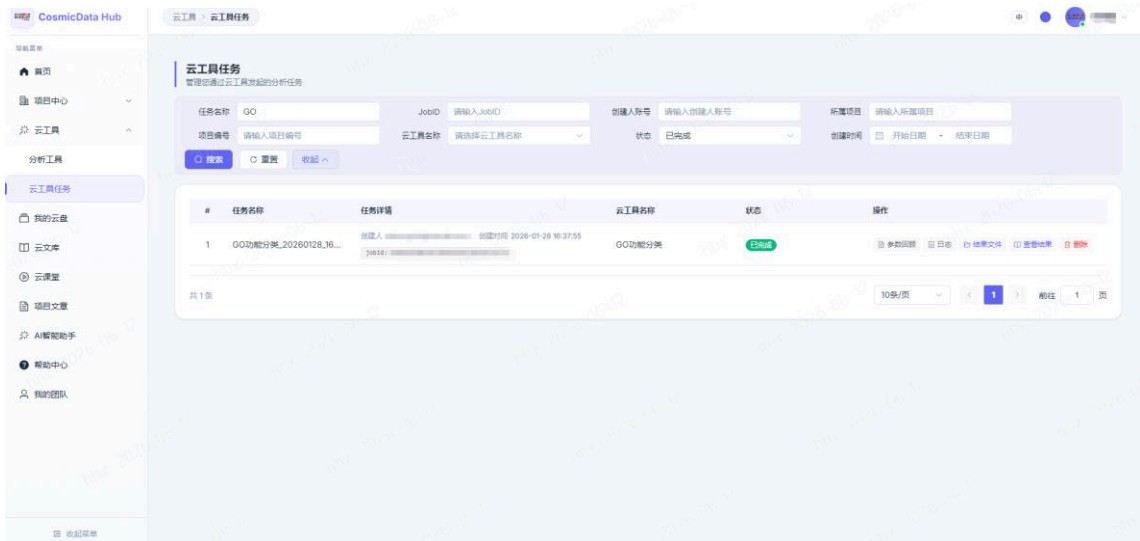


图 23 云工具任务页面

通过点击具体分析记录后面的“查看结果”即可跳转到任务分析结果详情页面，用户可以查看生成可视化的实际情况以及当时分析设定的具体参数阈值，对于生成的可视化结果，用户可以执行存入报告（替换原始结题报告中对应的内容）和多种格式下载等操作。

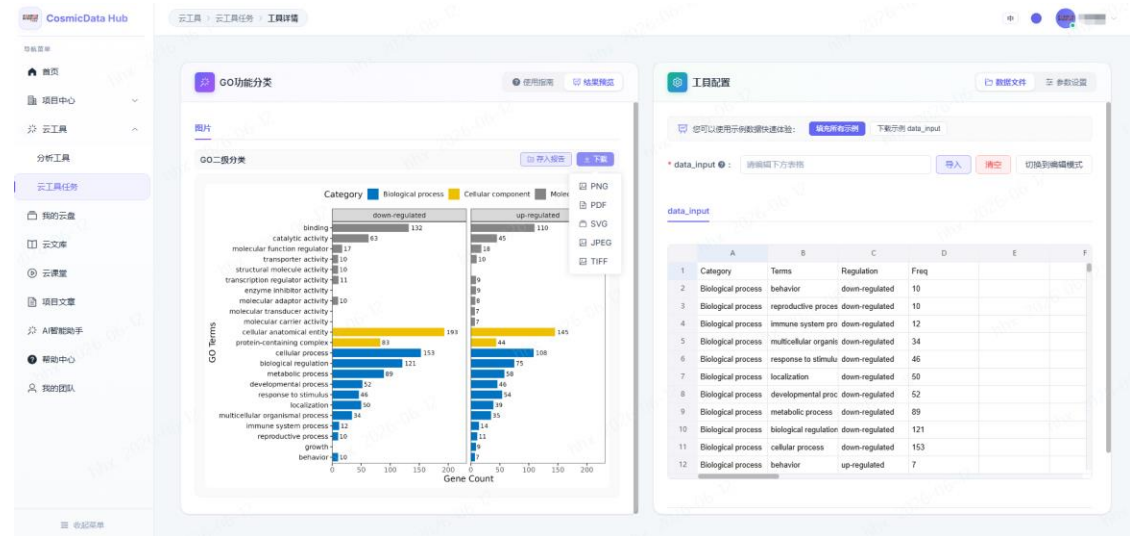


图 24 云工具查看结果页面

对于已存入结题报告中的内容，用户可在结题报告中对应地方通过点击“进入分析”跳转到当前模块对应的流程工具模块或云工具模块，实现快速对结果进行多次分析和编辑修改。另外，用户还可在结题报告中通过上移和下移操作实现模块之间调换顺序的目的。

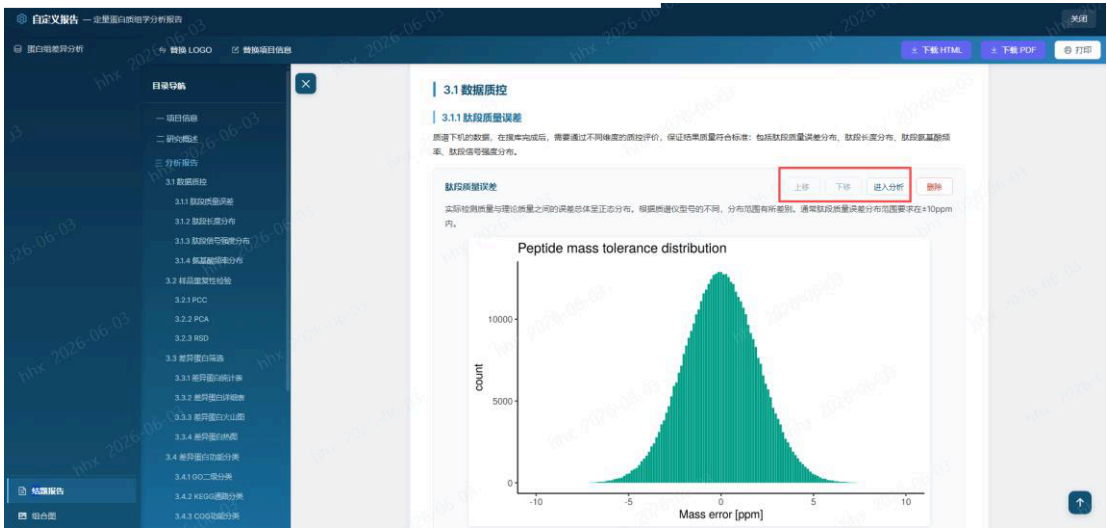


图 25 结题报告自定义页面

3.4 自定义编排

为满足用户将平台上生成图片直接用于文章发表，平台还引入了图片编排功能，用户只需要点击对应图片右上角的“存入图库”即可将图片导入自定义编排模块。

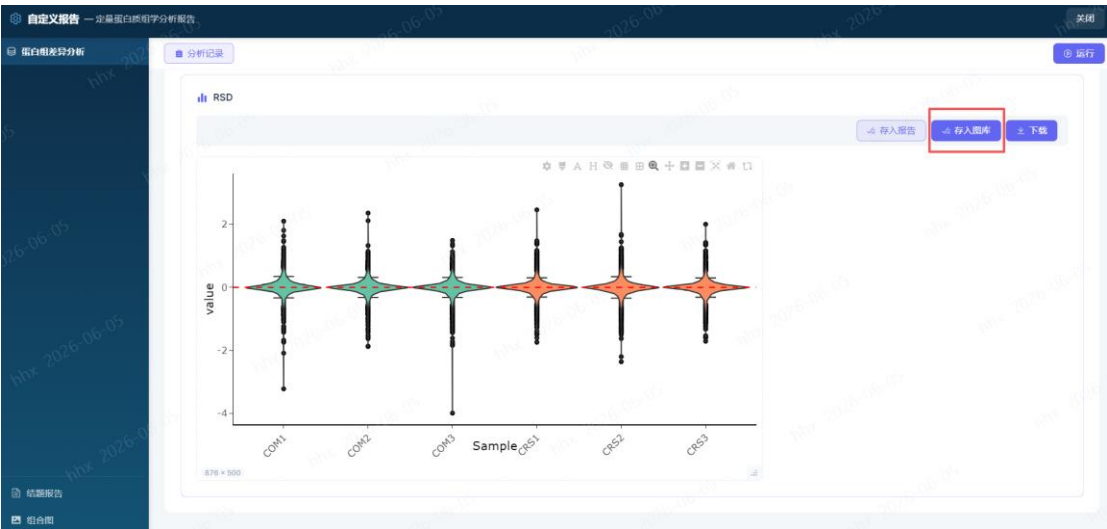


图 26 存入图库操作页面

用户点击左侧菜单栏底部的“组合图”选项即可进入自定义编排模块，接着将刚刚存入图库的图片拖拽到画布中，通过设置图片大小和添加文字标签等操作就可以实现自定义排版图片的目的。

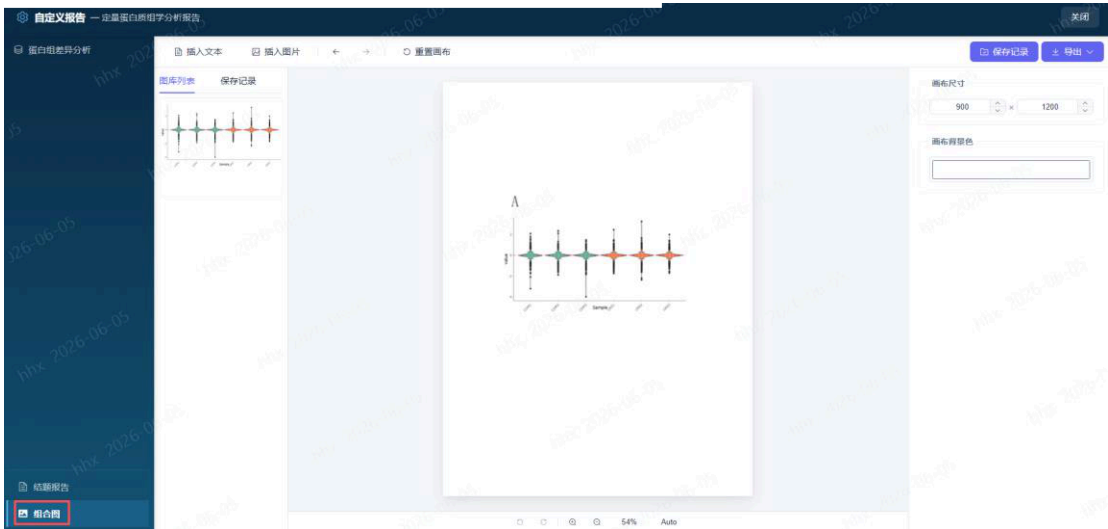


图 27 图片自定义编排页面

3.5 一键重分析

除了自定义报告之外，用户还可点击标准报告卡片上的“一键重分析”对整个报告重分析。在“一键重分析”功能页面，用户可通过修改样本名称、样本分组信息和其他输入参数阈值信息并点击右上方的”提交分析任务“按钮后即可提交重分析。

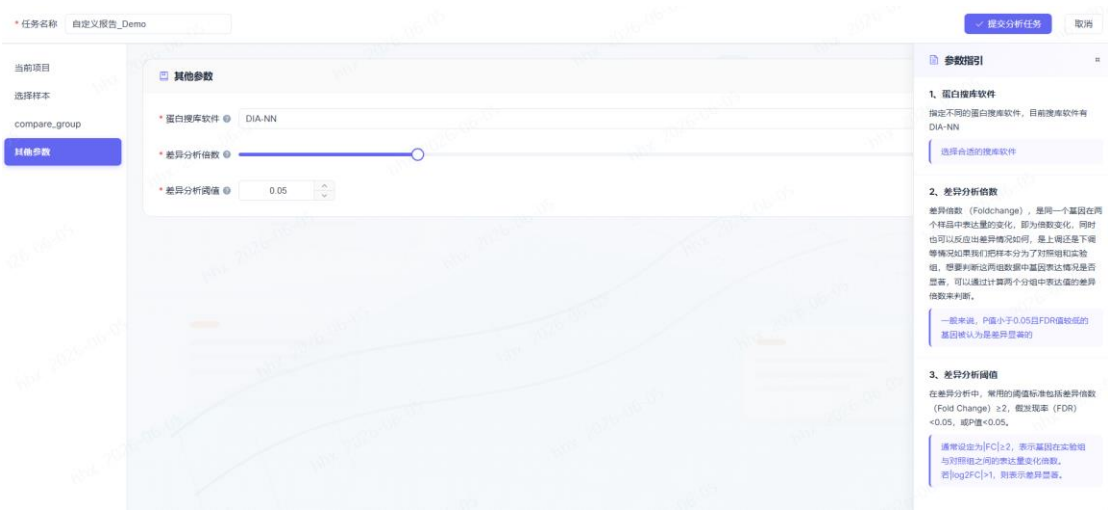


图 28 一键重分析详情配置页面

提交的一键重分析记录可在“项目中心—云流程任务—我分析的任务”中进行筛选查看，用户可对生成的记录进行参数回顾、日志查看、报告预览等一系列操作。同样用户也可再次进行自定义报告和一键重分析。

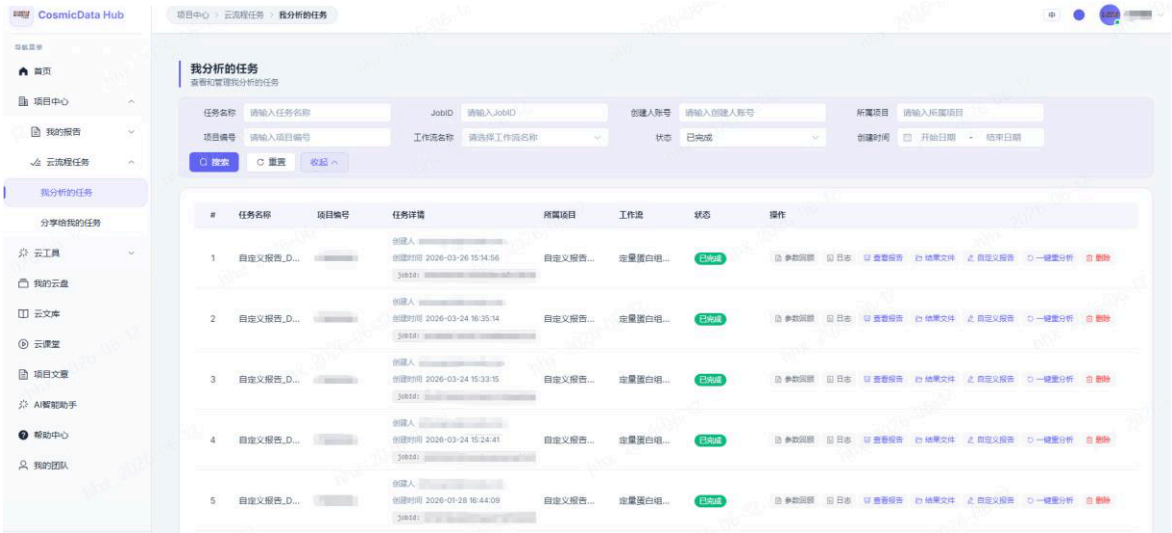


图 29 我分析的云流程任务页面

3.6 分享报告

平台目前支持用户将自己的标准报告分享给其他云平台账户，从而达到合同协作的目的。用户只需要点击标准报告卡片右上角的“分享”按钮，在跳转出的弹窗中输入被分享者的账号后点击分享即可。

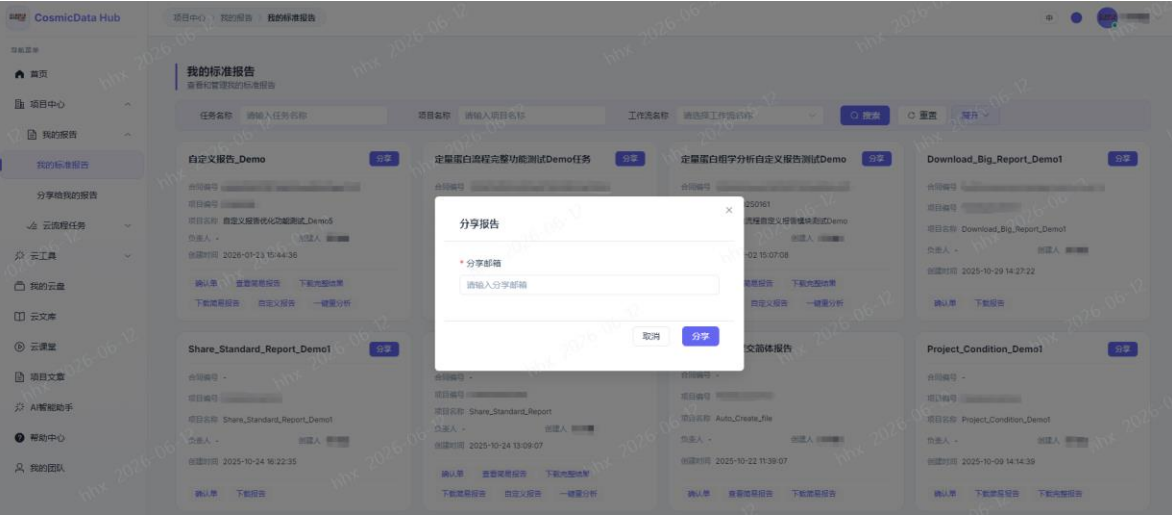


图 30 分享报告页面

被分享者登录自己的云平台账号，可在“项目中心—我的报告—分享给我的报告”模块中查看和操作分享者分享给自己的报告。

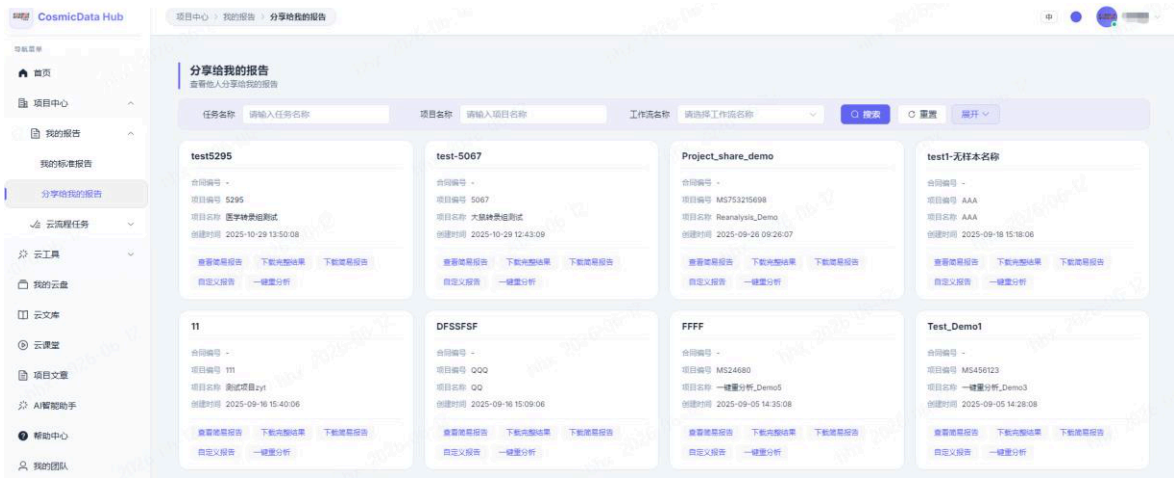


图 31 分享给我的报告页面

另外被分享者也可在“项目中心—云流程任务—分享给我的任务”模块中查看到分享者分享给自己标准报告配套的云流程任务记录。对这些分析记录被分享者同样可以进行自定义报告、一键重分析等一系列操作。

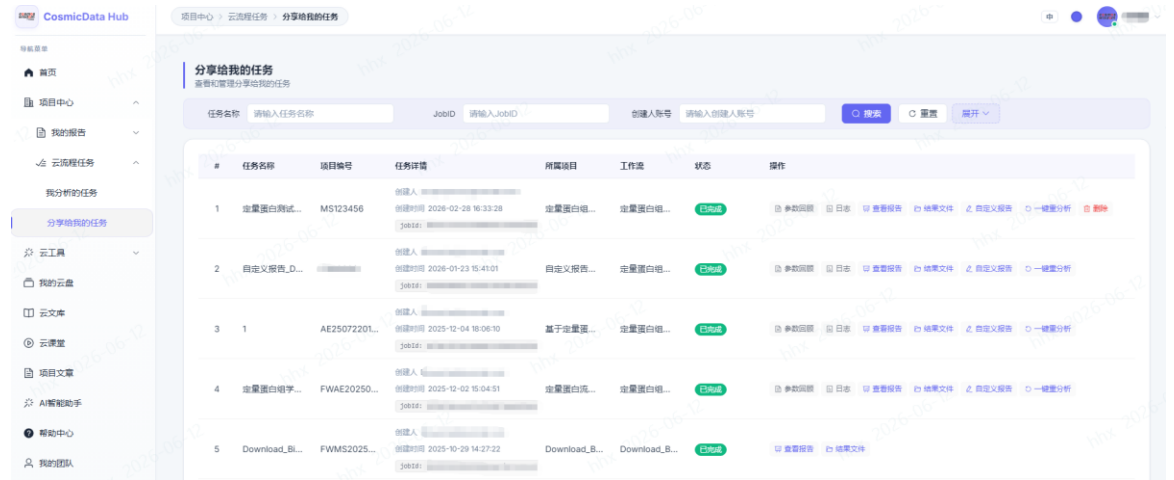


图 32 分享给我的任务页面

4. 云工具

平台提供了丰富的可视化在线工具，用户只需进入“云工具—分析工具”模块按照类别选择对应的可视化工具并设置好输入参数阈值提交分析即可（具体步骤可参照前面云工具相关内容）。

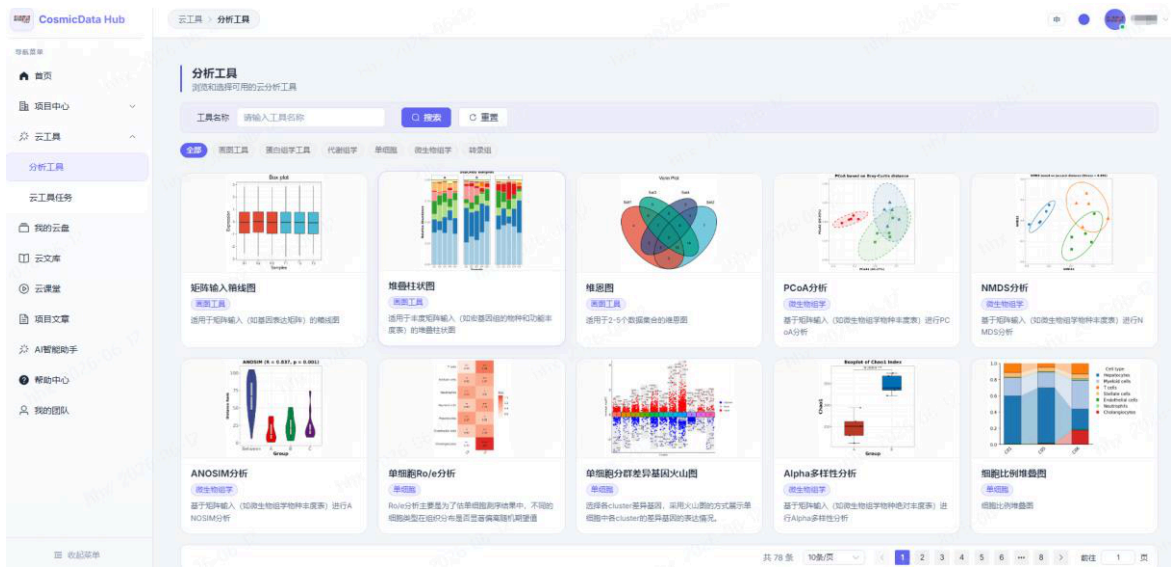


图 33 云工具列表页面

5. 我的云盘

平台还提供了云盘管理服务，用于管理客户账号个人文件空间，支持上传、下载、删除、重命名和目录浏览。上传文件前建议使用清晰命名，例如项目编号、样本批次、日期或版本号。

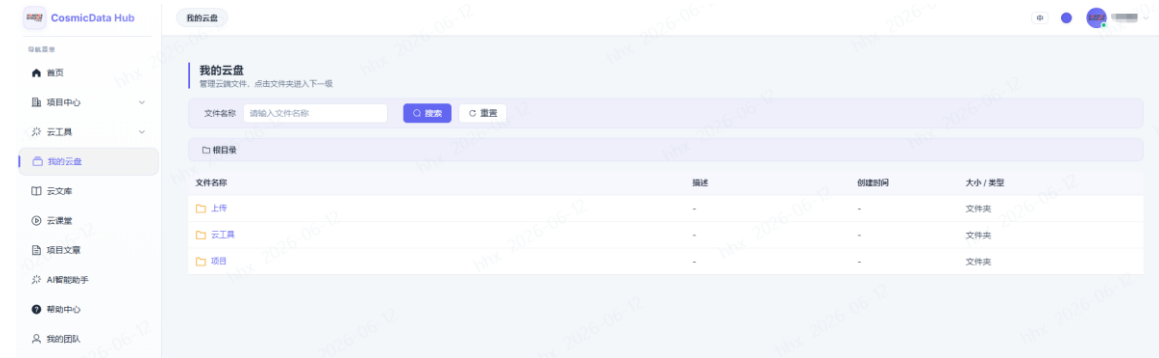


图 34 我的云盘页面

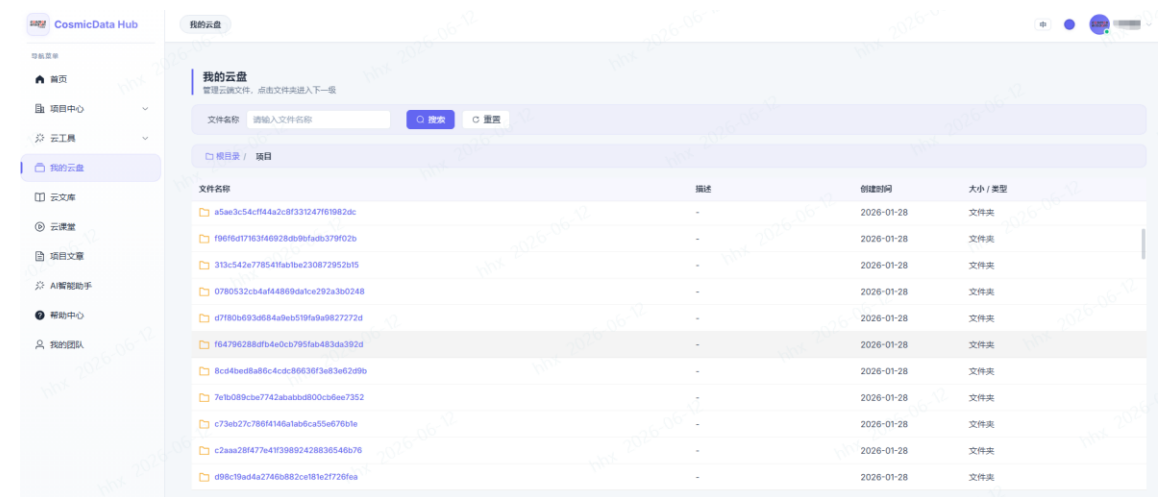


图 35 我的云盘详情页面

6. 知识服务

云文库：查看平台资料、产品文档、项目文章或培训材料。

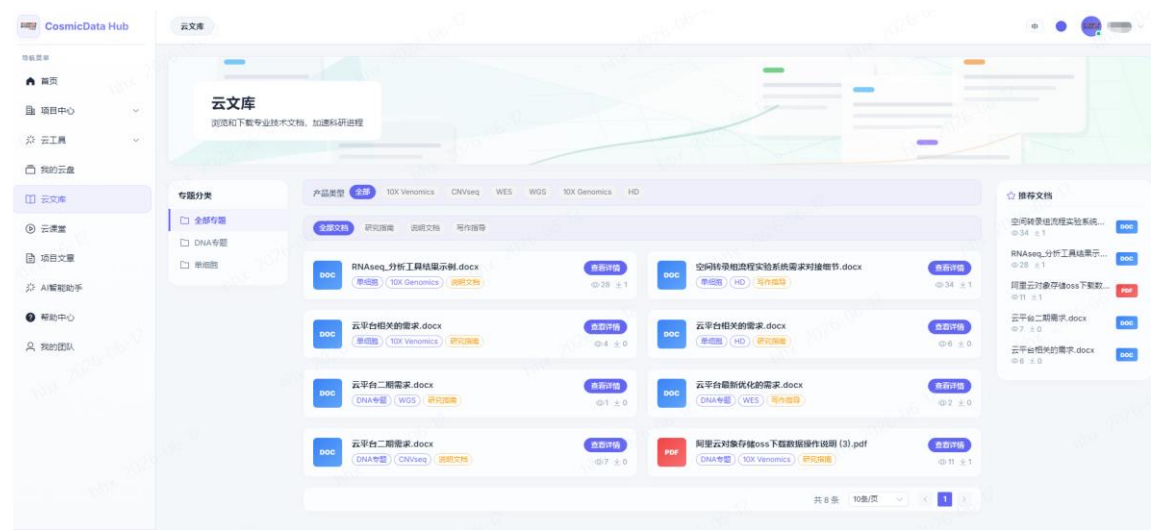


图 36 云文库

云课堂：查看培训课程和视频，适合新客户学习平台操作。

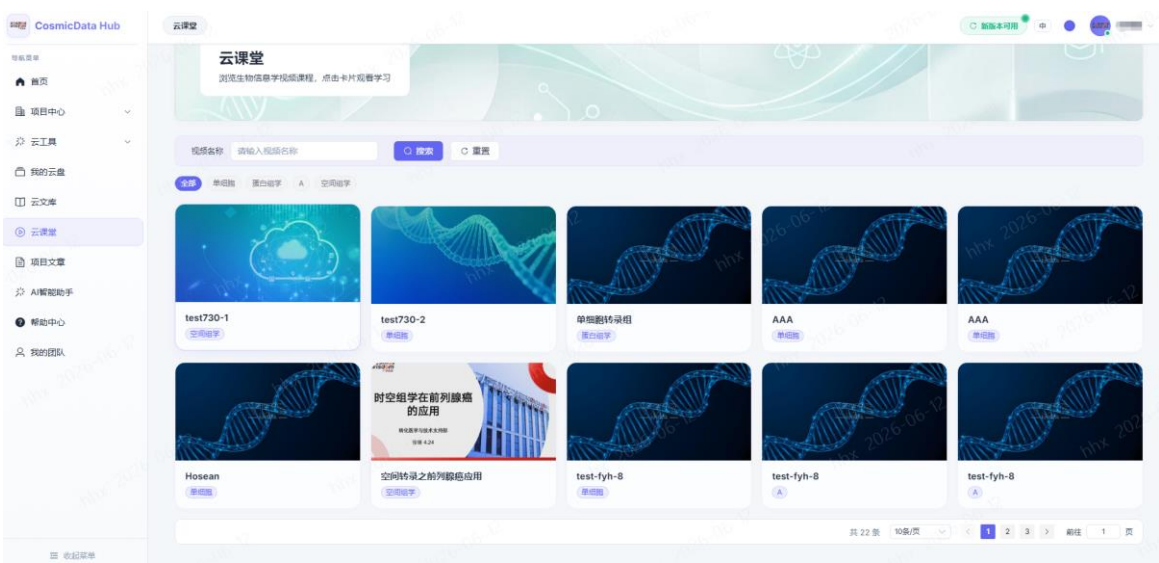


图 37 云课堂

项目文章：支持用户查询、查看近期合作发表文章的基本信息（包括题目、影响因子、发表单位、期刊名等），也支持通过点击查看直接跳转到文章主体内容进行查看。



图 38 项目文章

7. 我的团队

客户主账号可在“我的团队”中管理本单位成员。团队功能用于替代多人共用同一账号，便于分配权限、追踪操作和保护项目资料。查看成员：查看成员昵称、账号、角色、用户类型、手机号和加入时间。



图 39 我的团队详情

邀请成员：通过输入邀请数量和邮箱地址即可在对应邮箱中获取对应申请数量的邀请码。



图 40 邀请成员详情

邀请记录：可以对邀请码是否已经被注册（注册过的是划横线的）以及哪些子账号已经被绑定进行查看。

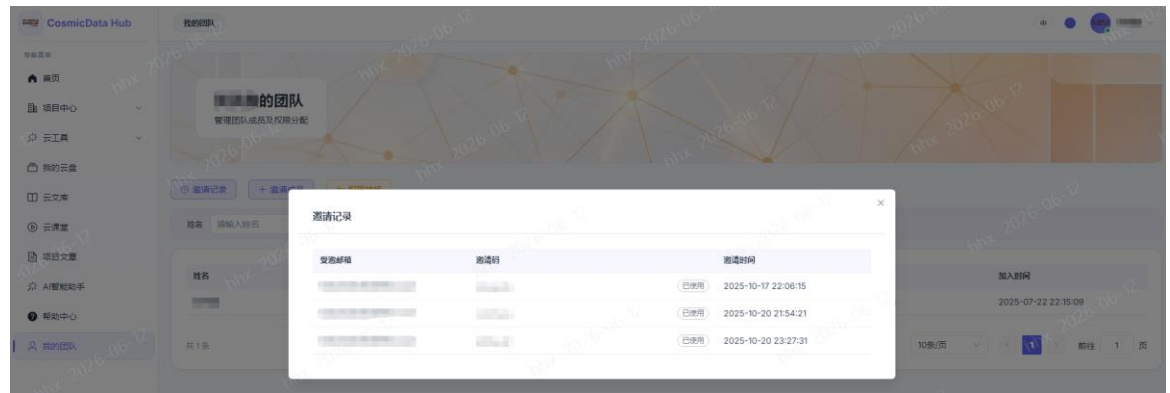


图 41 邀请记录详情

移除成员：成员离岗或项目结束后，可移除不再需要访问权限的子账号。建议客户单位定期检查团队成员列表，及时移除不再参与项目的成员，避免历史账号继续访问项目数据。

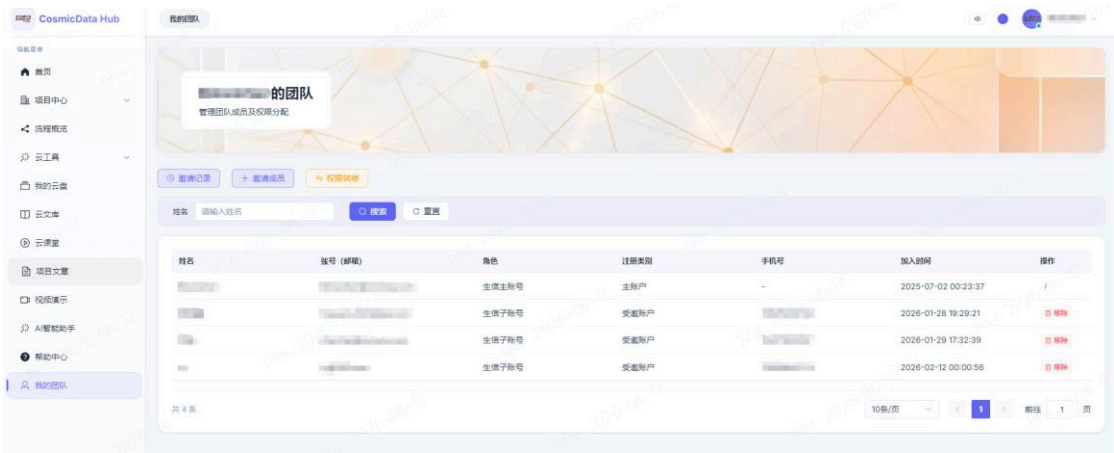


图 42 移除操作页面

权限转让：主账号需要变更负责人时，可按页面提示转让管理权限。

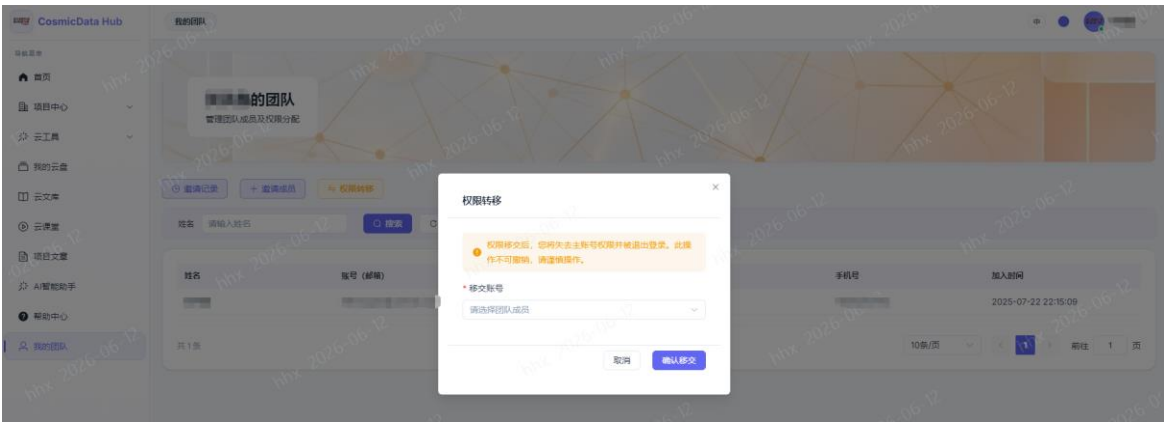


图 43 权限转移详情

8. AI 智能助手

平台还提供了一个科研智能分析平台，支持数据上传、智能问答、文献辅助和多种图表分析功能，可用于快速完成生物医学数据分析与可视化。

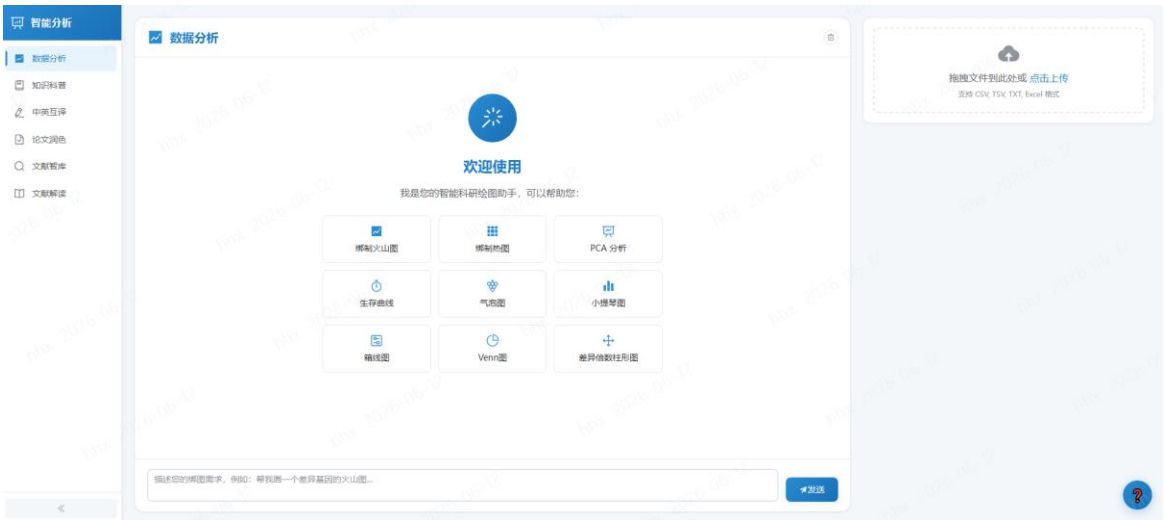


图 44 AI 智能助手详情

9. 客户使用安全建议

事项	建议
账号使用	一人一号，不共用账号；离职或换岗后及时停用。
密码管理	设置较强密码，不通过聊天工具明文发送密码。
设备安全	公共电脑不勾选记住密码，使用后退出登录。
数据下载	仅下载工作所需文件，不将报告和原始数据转发给无关人员。
问题反馈	反馈问题时提供项目编号、页面路径、操作时间和截图，避免发送未脱敏感数据。

10. 常见问题与处理建议

问题	处理建议
无法登录	确认账号、密码和验证码是否正确；仍失败时联系管理员重置密码。
验证码看不清或错误	点击验证码图片刷新；算术验证码需填写计算结果。
注册时是否需要邀请码	受邀加入团队时需要填写邀请码；普通自助注册可按页面要求填写，邀请码非必填时可先注册后由管理员授权。
邀请码失效或填写错误	联系客户主账号、项目交付人员或平台管理员重新发送邀请码。
看不到项目	确认账号是否加入对应团队或已被授权该项目。
看不到下载/编辑按钮	当前账号可能无该权限，请联系主账号或交付人员。
报告无法打开	刷新页面后重试；仍异常时记录报告名称和项目编号反馈。
任务失败	提供任务名称、提交时间和日志截图，由交付人员排查。
团队成员无法加入	检查邀请邮箱是否正确、邀请是否过期，必要时重新邀请。